

BIREGS

B.E.A.T. LIGHT RENT



Gebrauchsanweisung

Vorwort	04
1.0 Sicherheitshinweise	07
2.0 Technische Merkmale	
2.1 Zweck	08
2.2 Programme	08
2.3 Technische Daten	11
2.4 Bilder & Piktogramme	11
2.5 Reinigung & Wartung	12
2.5.1 Desinfektionsmittel	12
2.5.2 Anwendungshinweis	13

3.0 Bedienung B.E.A.T. Light Rent	
3.1 Tasten B.E.A.T. Light Rent	14
3.2 Display-Symbole B.E.A.T. Light Rent	16
3.3 Menüstruktur	18
3.4 B.E.A.T. Light Rent in Betrieb nehmen	20
3.5 B.E.A.T. Light Rent Programm einstellen	20
3.5.1 Bestrahlung einschalten	22
3.5.2 Laufzeit einstellen	22
3.5.3 Intensität einstellen	24
3.5.4 Sprache einstellen	25
3.5.5 Seriennummer anzeigen	27
3.5.6 Behandlung einlesen	28
4.0 Kundendienst & Service	
4.1 Biregs GmbH & Co. KG	29
4.2 Kontakt	30
4.3 Entsorgung	30

Vorwort

Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, will ich ihn ansehen und meines Bundes gedenken, der zwischen mir und allem Leben auf der Erde besteht. (Genesis 9,16)

Wenn wir Supermensch wären und Röntgenstrahlen, ultraviolette und infrarote Strahlen, Mikrowellen und Radiowellen mit bloßem Auge sehen könnten, was würden wir dann von unserer Welt und unseren Körpern sehen? Wir müssten auch die Röntgenstrahlen, die ultra-violetten und infraroten Strahlen, die Mikrowellen und Radiowellen innerhalb fester Körper sehen können. Anders gesagt, die aus Moleküle bestehenden Festkörper würden für uns vollkommen transparent erscheinen und alle elektromagnetischen Wellen sichtbar werden.

Stellen wir uns nun vor, wir wären solche Supermensch geworden, dann würden wir die Welt natürlich vollkommen anders sehen als bisher.

(von Prof. Chang-Lin Zhang)

Wer mit sich und seiner Umwelt im Einklang, in einem harmonischen Ausgleich lebt, der sollte sich rundum wohl fühlen. Einer der wesentlichen Faktoren unserer neuen modernen Wohlstandsgesellschaft ist, dass dieses Vorhaben nicht so einfach ist. Wichtige Säulen eines harmonischen Zusammenlebens von uns mit unserer Umwelt sind Ernährung, Bewegung, Schlaf, geistige Zufriedenheit, Spiritualität und Prophylaxe. Was können wir für unsere Gesundheit und Prophylaxe tun? Die Firma Biregs hat ein innovatives Wellness Gerät B.E.A.T. Light Rent entwickelt, welches Sie bei Ihren Bemühungen unterstützt, diesen Einklang zu erreichen und vor allem auch zu halten.

Schon seit langem ist in der Physik bekannt, dass alle Dinge dieser Welt aus Schwingungen bestehen. Nach dem Kenntnisstand der heutigen Wissenschaft besteht das Licht der Sonne und der Lampen aus elektromagnetischen Wellen. Wenn wir uns das Spektrum ansehen, können wir feststellen, dass unsere Sinneswahrnehmung nur das sichtbare Licht betrifft und ziemlich armselig der Bereich der elektromagnetischen Wellen wahrgenommen wird.

Lesetipp:

Der unsichtbare Regenbogen und die unhörbare Musik
(von Prof. Chang-Lin Zhang)

Da diese elektromagnetischen Wellen mit der Quantenmedizin in Zusammenhang gebracht werden, wird auch oft der Ausdruck melodisches Licht verwendet. Internationale Studien belegen, dass monochromatisches (einfarbiges) rotes Licht und infrarotes Licht bestimmter Wellenlängen die Enzyme des Antioxidanzschutzes stimulieren. Außerdem bewirkt es eine Steigerung der Glutathionperoxidase-Produktion der Leber. Es stimuliert die Bildung von ATP, das den Energievorrat der Zellen ausmacht. Man hat auch festgestellt, dass das Kalzium- Ionen-Gleichgewicht in den Zellen positiv beeinflusst wird. Rotes Licht und Infrarotes Licht regulieren oxidative Prozesse, die ihrerseits den Zellenmetabolismus und die Kollagensynthese bei Fibroblasten steigern, sowie das Aktionspotential der Nervenzellen, die Bildung von DNA und RNA im Zellkern fördern und die Mitochondrien und Leukozyten stimulieren. Auch die Enzyme des Antioxidanzschutzes Katalase und Superoxidismutase haben ein Absorptionsmaximum für rotes und infrarotes Licht.

Diese Form der Regulation ist auch oft unter dem Namen Low-Level-Laser bekannt, die geschichtlich in das Jahr 1963 zurückgehen, in dem der Forscher Endre Mester an der Semmelweis Universität in Budapest eine Studie veröffentlichte über den Einfluss von Low-Level-Laser auf das Gewebe. Was die wenigsten wissen, dass es sehr viele Studien in diesem Bereich gibt, z.B. in den Datenbanken der Pubmed und Medline, die aber nie bis zum Endverbraucher durchgedrungen sind.

Wie kann ich das B.E.A.T. Light Rent sinnvoll nutzen.

Das B.E.A.T. Light Rent bietet 53 Regulationsprogramme, welche im Abschnitt technische Merkmale nachgesehen werden können. Die Bestrahlung des B.E.A.T. Light Rent können Sie lokal anwenden. Auch wird das Gerät oft durch auflegen auf Akkupunkturpunkte genutzt. Viele Nutzer applizieren die Bestrahlung auch auf die unterschiedlichen Chakren.

In unserer hektischen und oft stressigen Zeit können Sie das B.E.A.T. Light Rent für Ihre regelmäßige persönliche Kur nutzen und somit zu Ihrer wohlverdienten Ruhe kommen.

1.0 Sicherheitshinweise

- **ACHTUNG Quelle sendet IR aus**
- **Bitte die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen!**
- **Im Betrieb ist eine Gehäuseerwärmung des Netzteils und der Abstrahlungsoberfläche normal und unbedenklich.**
- **Das System sollte nicht abgedeckt und in der Nähe von Heizkörpern oder unter direkter Sonneneinstrahlung betrieben werden.**
- **Arbeiten Sie nie mit dem B.E.A.T. Light System, wenn das System einen schadhaften Netzanschluss, oder ein beschädigtes Gehäuse hat.**
- **Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Techniker ausgeführt werden.**
- **B.E.A.T. Light vor Spritzwasser und Feuchtigkeit schützen.**

2.1 Zweck

Das B.E.A.T. Light Rent ist ein Wellness Gerät, welches für das körperliche Wohlbefinden konzipiert ist. Es arbeitet in den Wellenlängen 650nm (rotes Licht) 840nm (infrarotes Licht). Dieses Licht wird je nach Programm unterschiedlich gepulst. Die unterschiedlichen Programme können zur Harmonisierung Ihres Körpers beitragen.

2.2 Programme

Die unterschiedlichen Programme finden Sie in der nachfolgenden Liste. Hier ist darauf zu achten, dass wir unterschiedliche Formen der Regulation haben:
hemmen, stimulieren, entspannen, stabilisieren

Wir bitten Sie, sehen Sie die Programme nicht statisch. Gehen Sie mit Ihrem B.E.A.T. Light Rent kreativ um. Versuchen Sie für sich die besten Programme und Intensitäten zu finden. Jeder Mensch reagiert unterschiedlich.

Sie können sich auch gerne unter unserer Website www.biregs.com registrieren und hier Erfahrungsberichte einsehen. Auch freuen wir uns, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen mitteilen, die immer zu einer Verbesserung des Produkts beitragen oder anderen Therapeuten weiterhelfen.

Nr	Programm	Nr	Programm
1	Muskelspannung hemmen	15	Zellstoffwechsel stimulieren
2	Muskelgewebe stimulieren	16	Blutdruck stabilisieren
3	Muskelwachstum stimulieren	17	Regenerationsfähigkeit stimulieren
4	Muskeltonus stimulieren	18	Endorphine Freigabe stimulieren
5	Spannungskopfschmerz entspannen	19	Polyneuropathie hemmen
6	Augenmuskel entspannen	20	Serotoninproduktion stimulieren
7	Augenmuskelkoordination stimulieren	21	Akuten Schmerz hemmen
8	Schlaf beruhigen stimulieren	22	Kopfschmerzen hemmen
9	Chronischen Schmerz hemmen	23	Sprachzentrum stimulieren
10	Langzeitgedächtnis fördern	24	Schmerz stark hemmen
11	Kurzzeitgedächtnis stimulieren	25	Schmerz mittel hemmen
12	Kognitive Fähigkeit stimulieren	26	Chronischen Schmerz hemmen
13	Schlafstörungen hemmen	27	Akute Sucht hemmen
14	Psychischen Stress mindern	28	Chronische Sucht hemmen

Nr	Programm	Nr	Programm
29	Pulsfrequenz stabilisieren	43	Infektion sanft hemmen
30	Milz stabilisieren	44	Allergische Reaktionen hemmen
31	Galle stabilisieren	45	Entzündung hemmen
32	Niere stabilisieren	46	Bakteriostase langzeit stabilisieren
33	Zellstoffwechsel stimulieren	47	Bakteriostase mittel stabilisieren
34	Zellstoffwechsel stabilisieren	48	Bakteriostase stark stabilisieren
35	Chronische HNO Infektion hemmen	49	Allgemeine Vitalisierung stimulieren
36	Lernprozess stimulieren	50	Allergische Reaktionen hemmen
37	Akute HNO hemmen	51	Immunsystem langfristig stimulieren
38	Wundheilung stimulieren	52	Knochenregeneration stimulieren
39	Sauerstoffzufuhr stimulieren	53	Physischen Stress hemmen
40	Immunsystem stabilisieren		
41	HNO Infektion hemmen		
42	Infektion stark hemmen		

2.3 Technische Daten

Nennspannung	+24V DC
Nennstrom	max. 0,3 A
Gewicht in g (Gramm)	215 g (ohne Netzteil)
Maße (Länge x Breite x Höhe)	145 mm x 85 mm x 20 mm
Gehäusematerial	PETG Transparent PVC-Hart Weiß
Schutzklasse	II
LEDs rot (nm)	645
LEDs infrarot (nm)	850

2.4 Piktogramme & Symbole



Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung



Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.



ACHTUNG: Quelle sendet IR aus

SN

Seriennummer

CE

CE-Zeichen

2.5 Reinigung & Wartung

Das B.E.A.T. Light Rent darf nicht mit Alkohol oder alkoholischen Lösungen gereinigt werden! Bei der Reinigung muss darauf geachtet werden, dass keine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt.

Das B.E.A.T. Light Rent darf nur von autorisierten Technikern der Firma Biregs GmbH&Co.KG geöffnet und repariert werden!

2.5.1 Desinfektionsmittel

Für die Reinigung des B.E.A.T. Light Rent Systems wurde folgendes Desinfektionsprodukt getestet und freigegeben:

- **mikrozid® sensitive liquid** der Firma Schülke & Mayr GmbH
- **mikrozid® sensitive wipes** der Firma Schülke & Mayr GmbH

Diese Produkte sind alkoholfreie Schnell-Desinfektionspräparate für alkoholempfindliche Flächen, mit einer schnellen und guten Wirksamkeit.

2.5.2 Anwendungshinweis

Beim Anwenden der Desinfektionsmittel wird das Tragen von Schutzhandschuhen (z.B. aus Nitrilkauschuk) empfohlen.


Desinfektionsmittel sicher verwenden und vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Das Desinfektionsprodukt **mikrozid® sensitive liquid** ist eine gebrauchsfertige Lösung. Diese unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Ggf. überschüssige Präparatemengen mit ungefärbtem Einmaltuch entfernen.

Beim Produkt **mikrozid® sensitive wipes** Flächen mit getränktem Tuch gründlich wischen, auf vollständige Benetzung achten und einwirken lassen. Zur Anwendung auf besonders großen Flächen ggf. mehrere Tücher verwenden.

Die Produkte können bei der Firma Biregs GmbH&Co.KG oder Ihrem Distributor bezogen werden.

3.1 Tasten B.E.A.T. Light Rent

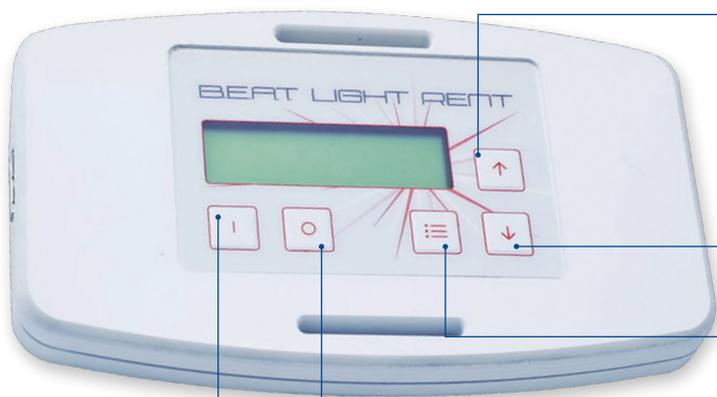

Einschalten

Mit dem Drücken der Einschalttaste von ca. 3 Sekunden wird die ausgewählte Behandlung aus dem Display aktiviert.

Auswahl „hoch“

Mit der Taste „Auswahl hoch“ können Sie im Menü „Einstellungen“, „Programme“ und „Sprachen“ Ihre Auswahl nach oben navigieren.

Auswahl „runter“

Mit der Taste „Auswahl runter“ können Sie im Menü „Einstellungen“, „Programme“ und „Sprachen“ Ihre Auswahl nach unten navigieren.

Menü

Mit dem Drücken der Menütaste von ca. 3 Sekunden gelangen Sie in das Menü des B.E.A.T. Light Rent Systems, um hier Ihre Einstellungen für das auszuführende Programm, die Intensität, die Laufzeit und die Sprache einstellen zu können.

Ausschalten / Abbruch

Bei Drücken der Ausschalttaste von ca. 3 Sekunden wird das B.E.A.T. Light Rent System ausgeschaltet.

Sollten Sie bei der Eingabe von Einstellungen im System einen Fehler gemacht haben, können Sie mit einem kurzen Tastendruck diesen Vorgang abbrechen und Sie gelangen zum Betriebszustand zurück.

3.2 Display-Symbole B.E.A.T. Light Rent



100%

Die Intensität gibt die Stärke der abgegebenen Strahlung der LEDs an.



75%

Jeder menschliche Organismus reagiert anders auf die Bestrahlung mit Licht. Bei sehr sensiblen Menschen, sind manchmal schon 25% der Strahlung ausreichend, um den gewünschten Erfolg zu erzielen. Hier sollten Sie für sich die beste Intensität aussuchen.



50%

Die Intensität kann im Menü unter Intensität in 25% Schritten eingestellt werden.



25%

Betriebszeit

0:01

1 Minute

Die Betriebszeit zeigt die Zeit an, in welcher das B.E.A.T. Light Rent das Licht mit dem ausgewählten Programm ausstrahlt.

0:20

20 Minuten

Nach Ablauf der Zeit, wird die eingestellte Bestrahlung automatisch abgeschaltet.

Die Betriebszeit kann in Menü unter Laufzeit in 1 Minuten Schritten eingestellt werden.

Die maximale Einstellung der Bestrahlung ist 20 Minuten.



Programmmodus

B.E.A.T. Light Rent Modi

Im Programm-Modus werden alle Programme des B.E.A.T. Light Rent Systems angezeigt und können selbstständig vom Nutzer ausgewählt werden.



Stick Modus

Im Stick-Modus wird nur das Programm auf dem B.E.A.T. Light Rent System abgespielt, welches mit einem B.E.A.T. Stick aufgespielt wurden. Eine eigenständige Auswahl von Programmen wie im Programm Modus ist nicht möglich.

B.E.A.T. Stick
einlesen

Diese Symbol zeigt das Einlesen von Programmen in das B.E.A.T. Light Rent System an.




Fehler bzw. Problem

B.E.A.T. Light Rent Fehler

Bei diesem Symbol ist ein Fehler oder ein Problem bei dem B.E.A.T. Light Rent System vorhanden. Kontaktieren Sie hierzu den Support des B.E.A.T. Light Rent.

3.3 Menüstruktur

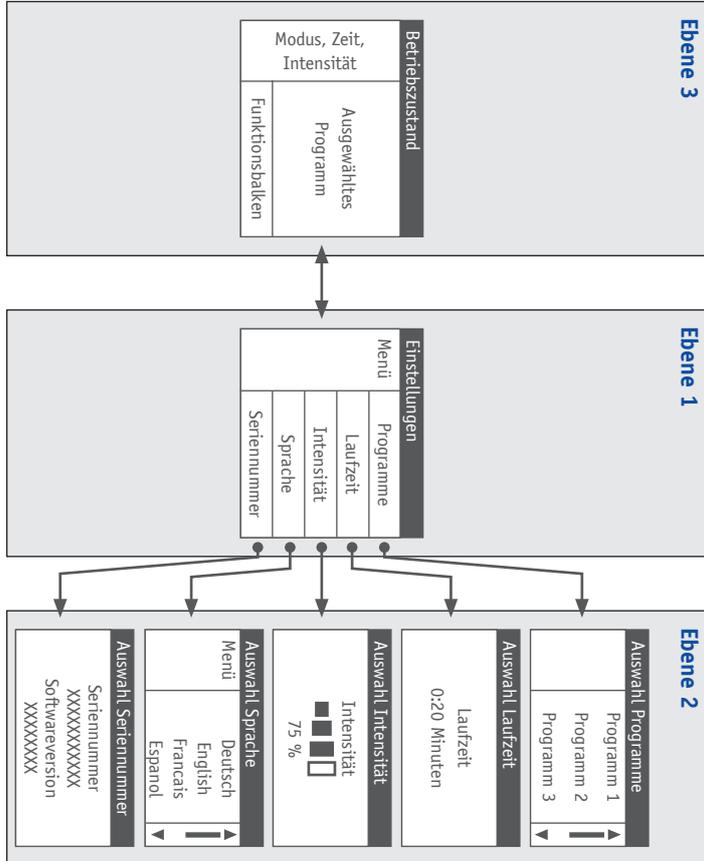

Ebene 1 / Einstellungen

Menü für die B.E.A.T. Light Rent Einstellungen

In den B.E.A.T. Light Rent Einstellungen können grundlegende Konfigurationen, wie z.B. die Seriennummer eingesehen oder die B.E.A.T. Light Rent Systemsprachen verändert werden. Des Weiteren können hier die Programme für die Behandlung und deren Laufzeit, sowie die Intensität eingestellt werden.

Ebene 2 / Untermenüs

Auswahl Programme:

Auswahl des Programmes, welches das B.E.A.T. Light Rent ablaufen lassen soll.

Auswahl Laufzeit:

Auswahl der Laufzeit des ausgewählten Programmes.

Auswahl Intensität:

Einstellung der Intensität der Abstrahlung.

Auswahl Sprache:

Einstellung Systemsprache des B.E.A.T. Light Rent.

Auswahl Seriennummer:

Hier kann die Seriennummer Ihres B.E.A.T. Light Rent nachgesehen werden. Des Weiteren wird die aktuelle Softwareversion angezeigt, die auf Ihrem B.E.A.T. Light Rent installiert ist.

Ebene 3 / Betriebszustand

Übersicht der Behandlungseinstellungen

Im Fenster des Betriebszustandes wird das ausgewählte Programm, der Modi des B.E.A.T. Light Rent, die für das Programm eingestellte Intensität und die noch zu laufende Zeit angezeigt. Wenn die Bestrahlung aktiv ist, läuft am unteren Rand des Displays ein Punkt von rechts nach links.

3.4 B.E.A.T. Light Rent in Betrieb nehmen



Um das B.E.A.T. Light Rent in Betrieb zu nehmen, stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Nachdem das B.E.A.T. Light Rent an den Strom angeschlossen ist, erscheint für ca. 5 Sekunden das Logo des Distributors im Display. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, über die Tasten das System zu bedienen.

3.5 Programm einstellen




Um ein **Programm** einzustellen, drücken Sie die Menütaste  für ca. 3 Sekunden. Hier gelangen Sie in das Hauptmenü des B.E.A.T. Light Rent.

Wählen Sie hier den Menüpunkt **Programme** mit den Tasten  oder  aus. Bestätigen Sie nun mit der Menütaste  Ihre Auswahl.



Sie gelangen nun in das Auswahlmeneü für die Programme.

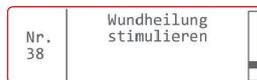

Wählen Sie hier mit den Tasten  oder  Ihr gewünschtes Behandlungsprogramm aus z.B.: Programm Nr.38 „Wundheilung stimulieren“

Tipp: Um schneller zwischen den Programmen zu wechseln, können Sie auch die Tasten  oder  lange drücken. Hierdurch laufen die Programme schneller durch.



Mit der Menütaste  speichern Sie Ihre Einstellung und gelangen zurück in das Hauptmenü. Hier können sie nun weitere Einstellungen durchführen.



Mit der Einschalttaste  starten Sie Ihr ausgewähltes Programm mit den vorgegebenen Einstellungen, und Sie bekommen den Betriebszustandsbildschirm angezeigt. Hier läuft nun am unteren Bildschirmrand ein Punkt von links nach rechts.

Mit dem Drücken der Ausschalttaste  können Sie Ihren Vorgang abrechnen, und Sie gelangen wieder ohne Veränderung Ihrer vorherigen Einstellung zurück in den Betriebszustandsbildschirm.

Sollten Sie nach 30 Sekunden keine weitere Auswahl getroffen oder Aktivität durchgeführt haben, wird die letzte Auswahl bestätigt, und Sie gelangen automatisch in den Betriebszustandsbildschirm mit den neuen Einstellungen zurück.

3.5.1 Bestrahlung einschalten



Um eine Bestrahlung zu starten, oder erneut nach Ablauf der eingestellten Zeit zu starten, klicken Sie auf die Taste . Sie erhalten darauf hin im Display das Logo des Distributors.



Nach 5 Sekunden kommen Sie in das Menü zur Einstellung von Programmen, Laufzeiten, Intensitäten usw. Hier können Sie nun Ihre weiteren Einstellungen durchführen.

3.5.2 Laufzeit einstellen



Um die **Laufzeit** zu verändern, drücken Sie die Menütaste . Hier gelangen Sie in das Hauptmenü des B.E.A.T. Light Rent.

Wählen Sie hier den Menüpunkt Laufzeit mit den Tasten  oder  aus. Bestätigen Sie nun mit der Menütaste  Ihre Auswahl.



Sie gelangen nun in das Auswahlmenü für die Laufzeit.



Hier können Sie mit den Tasten  oder  Ihre Laufzeit um jeweils 1 Minute erhöhen oder reduzieren, bis Sie Ihre gewünschte Laufzeit erreicht haben. Die maximale Laufzeiteinstellung ist 0:20 (20 Minuten).

Mit der Menütaste  speichern Sie Ihre Einstellung und gelangen zurück in das Hauptmenü. Hier können Sie nun weitere Einstellungen durchführen.




Mit der Einschalttaste  starten Sie Ihr ausgewähltes Programm mit den vorgegebenen Einstellungen, und Sie bekommen den Betriebszustandsbildschirm angezeigt. Hier läuft nun am unteren Bildschirmrand ein Punkt von links nach rechts.

Mit dem Drücken der Ausschalttaste  können Sie Ihren Vorgang abrechnen, und Sie gelangen wieder ohne Veränderung Ihrer vorherigen Einstellung zurück in den Betriebszustandsbildschirm.

Sollten Sie nach 30 Sekunden keine weitere Auswahl getroffen oder Aktivität durchgeführt haben, wird die letzte Auswahl bestätigt, und Sie gelangen automatisch in den Betriebszustandsbildschirm mit den neuen Einstellungen zurück.

3.5.3 Intensität einstellen

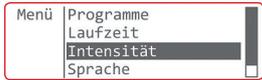

Um die **Intensität** der Bestrahlung zu verändern, drücken Sie die Menütaste . Hier gelangen Sie in das Hauptmenü des B.E.A.T. Light Rent.

Wählen Sie hier den Menüpunkt Intensität mit den Tasten  oder  aus. Bestätigen Sie nun mit der Menütaste  Ihre Auswahl.



Sie gelangen nun in das Auswahlmenü für die Intensität. Hier können Sie mit den Tasten  oder  Ihre gewünschte Intensität in 25% Schritten erhöhen oder senken.

Mit der Menütaste  speichern Sie Ihre Einstellung und gelangen zurück in das Hauptmenü. Hier können sie nun weitere Einstellungen durchführen.



Mit der Einschalttaste  starten Sie Ihr ausgewähltes Programm mit den vorgegebenen Einstellungen, Sie bekommen den Betriebszustandsbildschirm angezeigt. Hier läuft nun am unteren Bildschirmrand ein Punkt von links nach rechts.

Mit dem Drücken der Ausschalttaste  können Sie Ihren Vorgang abbrechen, und Sie gelangen wieder ohne Veränderung Ihrer vorherigen Einstellung zurück in den Betriebszustandsbildschirm.


Sollten Sie nach 30 Sekunden keine weitere Auswahl getroffen oder Aktivität durchgeführt haben, wird die letzte Auswahl bestätigt, und Sie gelangen automatisch in den Betriebszustandsbildschirm mit den neuen Einstellungen zurück.

3.5.4 Sprache einstellen



Um die **Sprache** zu verändern, drücken Sie die Menütaste . Hier gelangen Sie in das Hauptmenü des B.E.A.T. Light Rent.

Wählen Sie hier den Menüpunkt Sprache mit den Tasten  oder  aus. Bestätigen Sie nun mit der Menütaste  Ihre Auswahl.

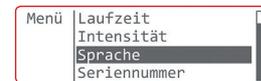

Sie gelangen nun in das Auswahlmenü für die Sprachen. Hier können Sie mit den Tasten  oder  Ihre gewünschte System-sprache auswählen.

Mit der Menütaste  speichern Sie Ihre Einstellung und gelangen zurück in das Hauptmenü. Hier können sie nun weitere Einstellungen durchführen.




Mit der Einschalttaste  starten Sie Ihr ausgewähltes Programm mit den vorgegebenen Einstellungen, Sie bekommen den Betriebszustandsbildschirm angezeigt. Hier läuft nun am unteren Bildschirmrand ein Punkt von links nach rechts.

Mit dem Drücken der Ausschalttaste  können Sie Ihren Vorgang abbrechen, und Sie gelangen wieder ohne Veränderung Ihrer vorherigen Einstellung zurück in den Betriebszustandsbildschirm.


Sollten Sie nach 30 Sekunden keine weitere Auswahl getroffen oder Aktivität durchgeführt haben, wird die letzte Auswahl bestätigt, und Sie gelangen automatisch in den Betriebszustandsbildschirm mit den neuen Einstellungen zurück.

3.5.5 Seriennummer anzeigen

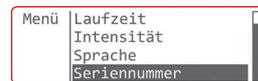

Um die **Seriennummer** Ihres B.E.A.T. Light Rent nach zu sehen, drücken Sie die Menütaste . Hier gelangen Sie in das Hauptmenü des B.E.A.T. Light Rent.

Wählen Sie hier den Menüpunkt Seriennummer mit den Tasten  oder  aus. Bestätigen Sie nun mit der Menütaste  Ihre Auswahl.

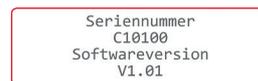

Sie kriegen nun im Display die Seriennummer und die aktuelle Softwareversion Ihres B.E.A.T. Light Rent Systems angezeigt.

Mit dem Drücken der Ausschalttaste  gelangen Sie wieder zurück in den Betriebszustandsbildschirm.

3.5.6 Behandlung einlesen



Um Behandlungen einzulesen wird ein B.E.A.T. Light Stick benötigt:

Auf diesen können Behandlungen des Therapeuten abgespeichert werden, die mit seinem Professional System aufgespielt werden können.



Um die Behandlung des Therapeuten einzulesen, gehen Sie wie folgt vor:

Stecken Sie den B.E.A.T. Light Stick mit der Behandlung Ihres Therapeuten in das B.E.A.T. Light Rent.



Stecken Sie das Netzteil des B.E.A.T. Light Rent an den Stromanschluss. Es wird nun die Behandlung des B.E.A.T. Light Sticks in das B.E.A.T. Light Rent eingelesen.

Hierbei wird für 2 Sekunden folgendes Symbol im Display angezeigt: 

Nach erfolgreichem Einlesen der Behandlung, startet die Behandlung automatisch mit den Vorgaben des Therapeuten.

4.1 Biregs GmbH & Co. KG

Die Firma BIREGS beschäftigt sich seit dem Jahr 2000 mit dem Vertrieb von Bioenergetischen Systemen sowie der Beratung und Schulung Ihrer Kunden. BIREGS verfügt inzwischen über die Qualitätszertifizierungen für den Vertrieb und die Herstellung von Biofeedbacksystemen.



4.2 Kontakt

Firma Biregs GmbH&Co.KG
Oberurseler Str. 70
61440 Oberursel
Deutschland

Tel: +49 (0) 6171 583301

Fax: +49 (0) 6171 583302

E-Mail: info@biregs.com

Internet: <http://www.biregs.com>

4.3 Entsorgung

Die Entsorgung der Geräte und Zubehörteile darf nur durch den Hersteller vorgenommen werden. Daher müssen alle Geräte und Zubehörteile an den Hersteller gesendet werden, damit dieser die fachgerechte Entsorgung durchführen kann.

Geräteverpackungen werden der Wertstoff-Wiederverwendung zugeführt.



BIREGS GmbH & Co. KG

Oberurseler Strasse 70 • 61440 Oberursel (Deutschland)

Telefon: +49 6171 58 33 01 • Fax: +49 6171 58 33 02

E-Mail: info@biregs.com • <http://www.biregs.com>